




## RT-6900 Czytnik mikroplitek




### Cechy:

- 7- calowy kolorowy, dotykowy ekran LCD z wbudowaną drukarką
- 8-kanałowy system światłowodowy, 5 sekundowy odczyt dla całej płytki
- Odczyt przy pojedynczej/podwójnej długości fali
- Funkcja wytrząsania płytki, nastawna częstotliwość i szybkość
- Przechowywanie do 100 programów i 10000 wyników próbek
- Możliwość ustawienie do 12 różnych oznaczeń na jednej płytce
- Automatyczny test systemu przy uruchomieniu
- Ustawianie kontroli dodatnich oraz ujemnych
- Automatyczne zapisywanie wyników w przypadku awarii zasilania
- Funkcja oszczędzania lampy

### Menu Główne

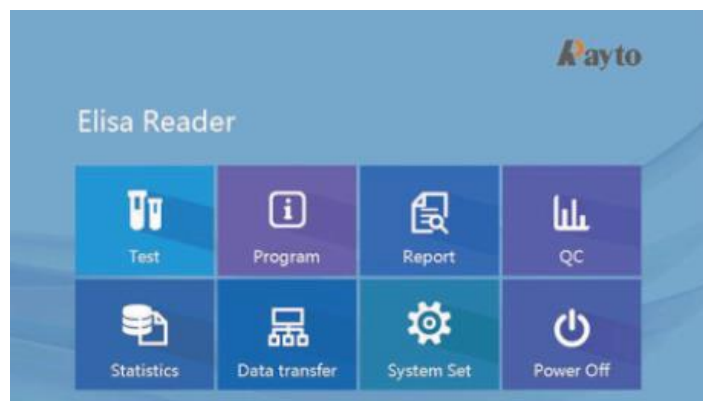

## Kalibracja

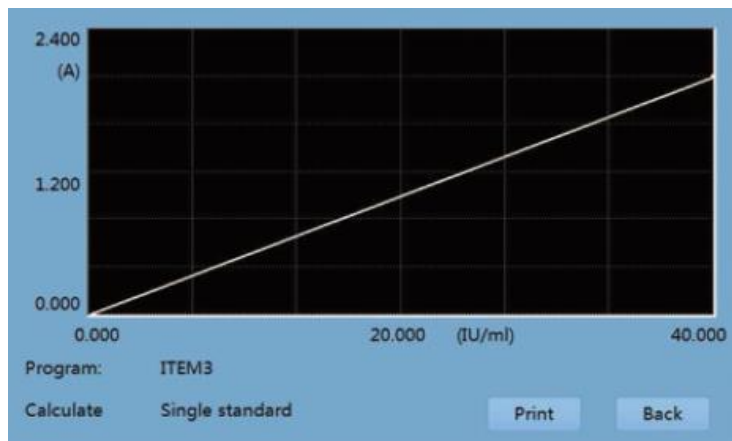

## Odczyt

Sample	BK	NC	PC	CR	Std	QC	Clear	PS				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
B	0013	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0020	0021	0022	0023	0024
C	0025	0026	0027	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036
D	0037	0038	0039	0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048
E	0049	0050	0051	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	0059	0060
F	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067	0068	0069	0070	0071	0072
G	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084
H	0085	0086	0087	0088	0089	0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096

Program: HBcAb Calculate Cut-Off  Horizontal  Vertical

New Select All Clear All Plate out Test Back

## Programowanie

Program Name

Full Name

Reagent Name

First wavelength  Second

Test Mode:

Calc Mode:

Double Sample Blank <=

>> Cancel

## Ustawianie Danych Pacjenta

### Specyfikacja techniczna

Zakres Absorbancji	0-4,000 Abs
Rozkład	0,001 Abs (wyświetlane), 0,0001 Abs (obliczone)
Źródło Światła	Lampa halogenowa 6V/19 W
System Optyczny	8-kanałowy system optyczny
Długości Fali	4 standardowe filtry: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 630 nm, 3 dodatkowe filtry (opcjonalnie)
Dokładność Fali	$\pm 2$ nm
Pasmo	$8 \pm 2$ nm
Metody Kalkulacji	ABS, Cut-off, Multi-percent, Percent log, Liniowa, wykładnicza, Index, 4PL, regresja itp.
Metody badania	Punkt końcowy, fixed-time, kinetyczny
Typ Płytki	Standardowa 96 dołkowa lub inna, paski
Szybkość Odczytu	5 sekund dla 96-dołkowej płytki (pojedyncza długość fali)
Wytrząsanie	Nastawny Czas wytrząsania i prędkość nastawne
Pamięć	Do 100 programów i 10000 wyników
Drukarka	Wbudowana termiczna drukarka, opcjonalnie podłączenie do drukarki zewnętrznej
Interfejs	Port USB, LAN, wejście na kartę SD, RS-232
Zasilanie	AC100~240 V, 50 Hz/60Hz
Wymiary (mm)	425 (dł)x310 (szer.)x 215 (wys.)
Waga	12 kg

Dystrybutor:

DRG MedTek Sp.z o.o.

Ul. Wita Stwosza 24

02-661 Warszawa

[office@drgmedtek.pl](mailto:office@drgmedtek.pl)